

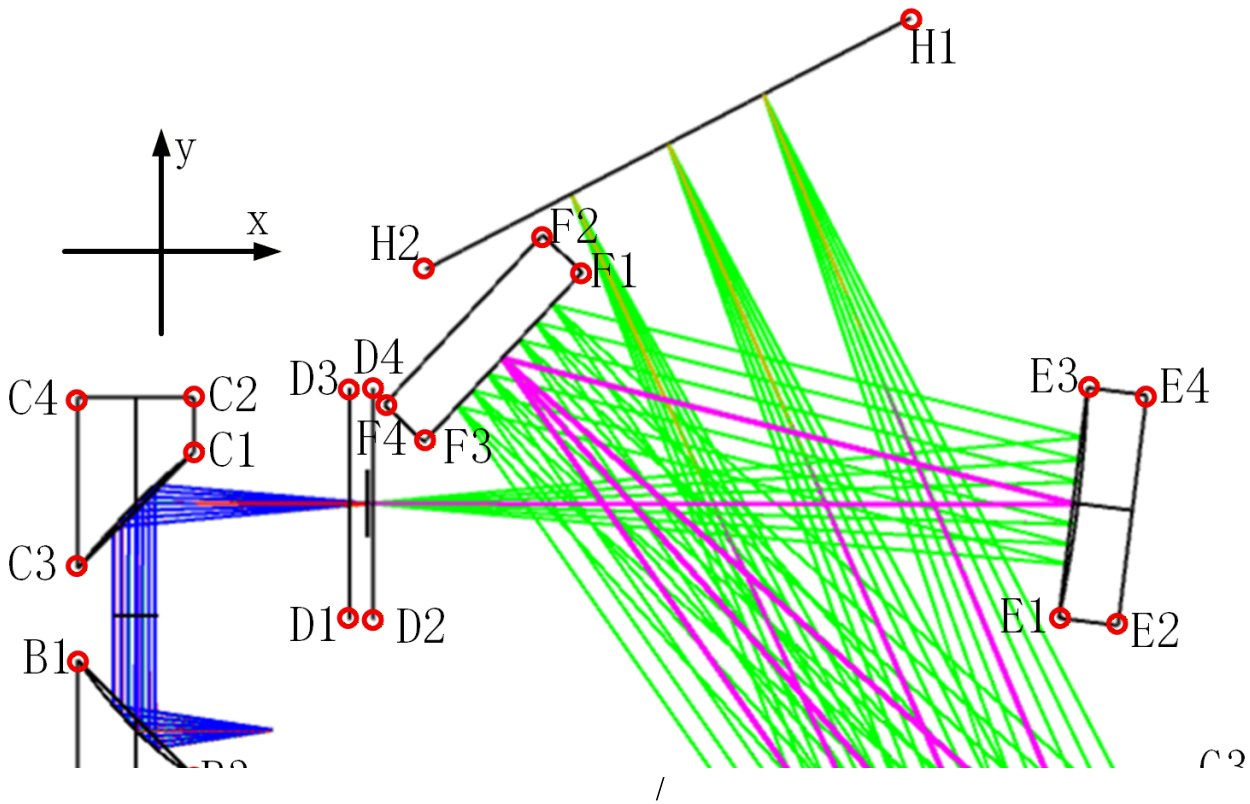
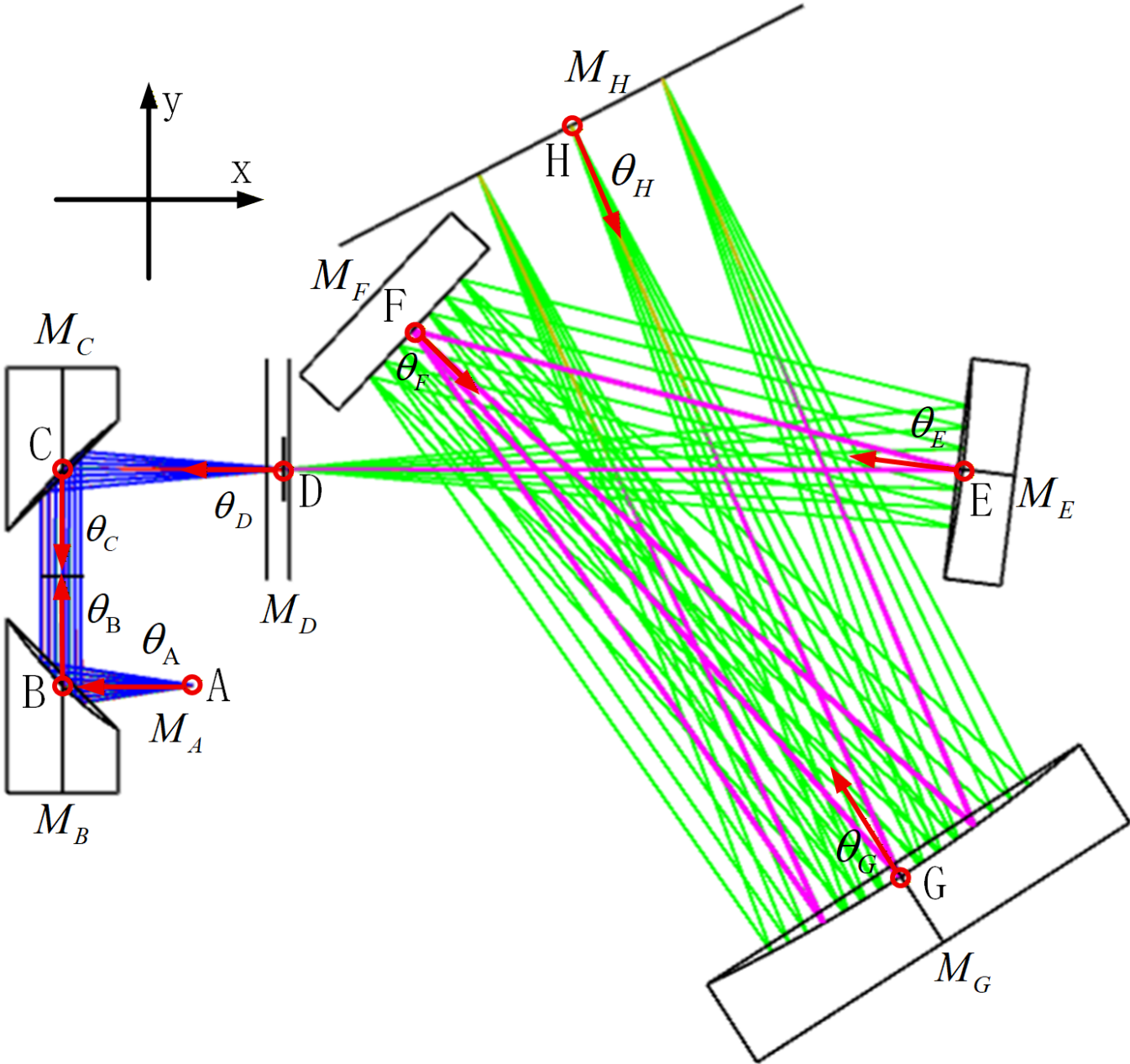


位置与方向角

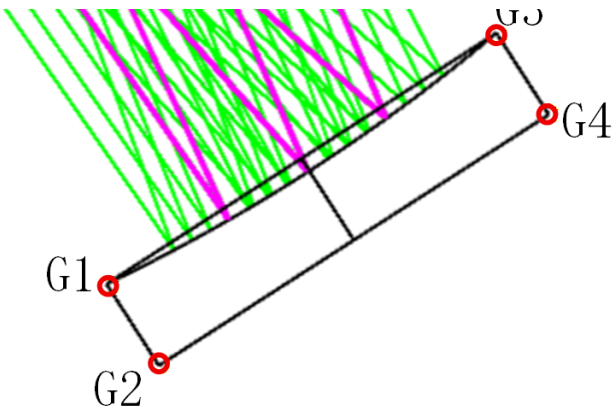

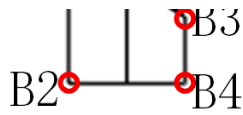

其中，

$A, B, \dots, H$ 表示中心光线与器件交点坐标

$B1, B2, \dots, C1, C2, \dots, H4$ 表示器件顶点坐标

$\theta_A, \theta_B, \dots, \theta_H$ 表示器件方向角

$M_A, M_B, \dots, M_H$ 表示器件

器件坐标（单位：mm，小数位：3）

A

$A=[-10.400, -24.800]$

B

$B=[-25.400, -24.800]$

$B1=[-31.750, -17.100]$

$B2=[-31.750, -37.100]$

$B3=[-19.050, -29.900]$

$B4=[-19.050, -37.100]$

C

$C=[-25.400, 0.000]$

$C1=[-19.050, 5.700]$

$C2=[-19.050, 11.700]$

$C3=[-31.75, -7.100]$

$C4=[-31.750, 11.700]$

D

$\$D=[0.000, 0.000]\$$

$\$D1=[-1.875, -12.700]\$$

$\$D2=[0.625, -12.700]\$$

$\$D3=[-1.875, 12.700]\$$

$\$D4=[0.625, 12.700]\$$

$\$E\$$

$\$E=[77.870, 0.000]\$$

$\$E1=[75.797, -12.540]\$$

$\$E2=[82.247, -13.347]\$$

$\$E3=[78.950, 12.664]\$$

$\$E4=[85.400, 11.857]\$$

$\$F\$$

$\$F=[14.873, 16.013]\$$

$\$F1=[23.539, 25.297]\$$

$\$F2=[19.153, 29.391]\$$

$\$F3=[6.207, 6.729]\$$

$\$F4=[1.821, 10.823]\$$

$\$G\$$

$\$G=[70.793, -46.668]\$$

$\$G1=[48.562, -59.058]\$$

$\$G2=[54.295, -67.975]\$$

$\$G3=[91.293, -31.586]\$$

$\$G4=[97.027, -40.503]\$$

$\$H\$$

$\$H=[32.954, 39.380]\$$

$\$H1=[59.593, 53.176]\$$

$\$H2=[6.315, 25.583]\$$

器件方向角（单位：°，小数位：3）

$\theta_A=180.000^\circ$

$\theta_B=90.000^\circ$

$\theta_C=-90.000^\circ$

$\theta_D=180.000^\circ$

$\theta_E=172.869^\circ$

$\theta_F=-43.028^\circ$

$\theta_G=122.737^\circ$

$\theta_H=-62.620^\circ$

器件

\$M_A\$（暂无）

1. 基本介绍

名称：光纤
作用：收集并输出指定NA的光束

2. 参数

NA：0.15
芯径：0.105 mm
接口：SMA905

3. 购买

国家：中国
平台：淘宝
链接：<https://e.tb.cn/h.7rhfFB1i7on9afj?tk=8xUmU7Y8vk0>

\$M_B\$（暂无）

1. 基本介绍

名称：90°偏轴抛物线面反射镜
作用：准直光线

2. 参数

RFL : 15 mm
直径 : 1/2 英寸
接口 : 无 , 裸镜片

3. 购买

国家 : 海外
平台 : 索雷博
链接 : <https://www.thorlabschina.cn/zh/item/MPD00M9-M01>

\$M_C\$ (暂无)

1. 基本介绍

名称 : 90°偏轴抛物线面反射镜
作用 : 汇聚光线

2. 参数

RFL : 25.4 mm
直径 : 1/2 英寸
接口 : 无 , 裸镜片

3. 购买

国家 : 海外
平台 : 索雷博
链接 : <https://www.thorlabschina.cn/zh/item/MPD019-M01>

\$M_D\$ (已有)

1. 基本介绍

名称 : 光学狭缝
作用 : 削弱光线芯径带来的离轴偏移视场对分辨率的影响

2. 参数

狭缝宽：5/10mm
直径：1 英寸
接口：已安装

3. 购买

国家：海外
平台：索雷博
链接：
5mm：<https://www.thorlabschina.cn/zh/item/S5K>
10mm：<https://www.thorlabschina.cn/zh/item/S10K>

\$M_E\$（已有）

1. 基本介绍

名称：凹面镜
作用：准直光线—为光栅提供平行光

2. 参数

焦距：75 mm
直径：1 英寸
接口：裸镜片

3. 购买

国家：海外
平台：索雷博
链接：<https://www.thorlabschina.cn/zh/item/CM254-075-M01>

\$M_F\$（暂无）

1. 基本介绍

名称：光栅
作用：分光

2. 参数

刻线密度：300 线/mm
长宽：1 英寸
接口：裸镜片

3. 购买

国家：海外
平台：索雷博
链接：<https://www.thorlabschina.cn/zh/item/GR25-0310>

\$M_G\$（暂无）

1. 基本介绍

名称：凹面镜
作用：汇聚光线到传感器

2. 参数

焦距：100 mm
直径：2 英寸
接口：裸镜片

3. 购买

国家：海外
平台：索雷博
链接：<https://www.thorlabschina.cn/zh/item/CM508-100-M01>

\$M_H\$（已有）

1. 基本介绍

名称：InGaAs传感器
作用：采集不同波段的光线

2. 参数

单像素尺寸：12.5 x 125 微米
像素数量：1024

3. 购买

未知